

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OPERATINGROOM MANAGER

Váš průvodce každodenním provozem

OPERAČNÍ BLOK
Krajská nemocnice Liberec

9. září 2026 16:45 Centrální sály

3D pohled Půdorys

PCHO 1 PCHO 2 PCHO 3 PCHO 4 PCHO 5 PCHO 6

Koncepční vizualizace

Sály v provozu 12 / 15

Připravené sály 4

Dnešní výkony 38 / 52

Dnešní program

PCHO 1 PCHO 2 PCHO 3 PCHO 4 PCHO 5 PCHO 6

PCHO sál č. 2

Probíhá výkon

01:24 04:00

Uplynulý čas 01:24 Od 15:21

Odhad konce 17:10 Dle plánu

Tým na sále 4 / 4 Kompletní

Další výkon 17:30 Hernioplastika

Otevřít detail sálu

Provozní upozornění

Sál 04

Úklid končí v 16:55

Zobrazit

Ukázková data | Krajská nemocnice Liberec | ORMS v1.0

Efektivnější péče. Každý den.

Od prvního přihlášení přes práci na sále až po přehledy, plánování a 3D dispozici.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

POSTUPY PRO SPRÁVCE

Praktické kroky • srozumitelná vysvětlení • bez technických parametrů

NEJPRVE SE ZORIENTUJTE

Jak příručku používat

Čtete od začátku, nebo klikněte na kapitolu, kterou právě potřebujete.

ZAČÍNÁME

Přihlášení a orientace	03
Rychlý začátek	04
Přehled operačních sálů	05

PRÁCE NA SÁLE

Detail a přechod mezi fázemi	06
Přiřazení personálu	07
Výzva pacienta a odhad konce	08
Pauza a hygienický režim	09
Dokončení cyklu	10
Notifikace a zprávy	11

PŘEHLEDY A PLÁNOVÁNÍ

Tok pacienta	12
Timeline	13
Rozpis sálů a kalendář	14
Personál a přehled dostupnosti	15
Statistiky	16
Tisk a uložení do PDF	17

3D DISPOZICE

Prohlížení operačního bloku	18
Úpravy místností a vybavení	19
Zarovnání a obvodové stěny	20

SPRÁVA A POMOC

Nastavení provozní doby	21
Nastavení a přístupová práva	22
Když něco nefunguje	23
Kontrolní seznam pro směnu	24

Kliknutím na zápatí libovolné stránky se vrátíte na tento obsah.

ZAČÍNÁME

Přihlášení a orientace

Každý uživatel vidí pouze funkce, které má pro své zařízení povolené.

- 1 Otevřete aplikaci**
Na přihlašovací obrazovce zkontrolujte správné **zdravotnické zařízení**.
- 2 Použijte svůj přístup**
Zvolte přidělenou roli nebo vyplňte přihlašovací jméno, zadejte heslo a stiskněte **Přihlásit se**. Výběr role sám o sobě není přihlášením.
- 3 Vyberte požadovaný modul**
Na počítači použijte ikony vlevo. Po najetí myší se zobrazí název. Na telefonu je hlavní navigace dole a některé názvy jsou zkrácené.
- 4 Po skončení se odhlaste**
Použijte **Odhlásit**. Na sdíleném počítači nenechávejte otevřený účet bez dozoru.

Nevidíte některou položku?

Dostupnost modulů a jejich částí závisí na oprávněních. Chybějící položku řešte se správcem; není nutné zakládat další účet ani volit jinou nemocnici.

Přístup superadministrátora

Superadministrátor používá vyhrazené přihlášení přes Google. Postupujte podle zobrazených pokynů k ověření. Běžný administrátor pracuje uvnitř přiděleného zařízení a nepřepíná nemocnice.

RYCHLÝ ZAČÁTEK

Prvních pět kroků

Základní postup při převzetí sálu do práce.

- 1 Najděte svůj sál**

V modulu **Přehled** vyberte kartu sálu. V prostorovém zobrazení vyberte sál a poté **Otevřít detail sálu**.
- 2 Zkontrolujte stav a obsazení**

Ověřte název sálu, aktuální fázi a osoby u tlačítek **Lékař** a **Sestra**.
- 3 Zaznamenejte skutečný průběh**

Po dokončení příslušného kroku otevřete přechod do další fáze, zkontrolujte její název a stiskněte **Potvrdit**.
- 4 Průběžně upravujte odhad**

Pomocí **+** a **-** upravte očekávaný konec. Při přerušení využijte **Pauza**; po obnovení **Pokračovat**.
- 5 Dokončete celý cyklus**

Po poslední fázi použijte **Nový cyklus** a potvrďte návrat do připraveného stavu. Pouhé zavření detailu cyklus neukončuje.

Nejdůležitější pravidlo

Nejprve ověřte sál a skutečnou situaci, potom změnu potvrďte. Aplikace slouží k evidenci a koordinaci; nenahrazuje zavedené postupy pracoviště.

PŘEHLED

Co říká karta sálu

Z přehledu zjistíte aktuální situaci a otevřete podrobné ovládání.

Karty

3D dispozice

PCHO SÁL Č. 2

● Chirurgický výkon

PERSONÁL



Lékař / Sestra

Otevřít sál

Název sálu

Před každou změnou ověřte, že pracujete se správným sálem.

Aktuální fáze

Řiďte se názvem stavu. Barvy nastavuje vaše zdravotnické zařízení.

Personál

Přiřazené osoby zkontrolujete a změníte v detailu sálu.

Výběr není změna provozu

Kliknutí na kartu otevře detail. Samo o sobě nespouští výkon, nepřiděluje personál ani nemění fázi.

Barva pomáhá, název rozhoduje

Barevné zvýraznění odpovídá stavu nebo zvláštnímu režimu. Názvy a barvy může správce upravit; nespolehejte jen na jednu univerzální barvu.

Připravenost není provozní doba

Stav **Sál připraven** znamená fázi pracovního cyklu. O tom, zda je pro daný den nastaven provoz, rozhoduje týdenní rozvrh v OR CONTROL.


Na menší obrazovce

Karty a ovládání se přeskupí podle místa. Pokud se všechny nevejdou, přehled posuňte. Před akcí vždy zkontrolujte celý název sálu.

DETAIL SÁLU

Přechod do další fáze

Změnu fáze provádějte ve chvíli, kdy odpovídá skutečnému dění na sále.

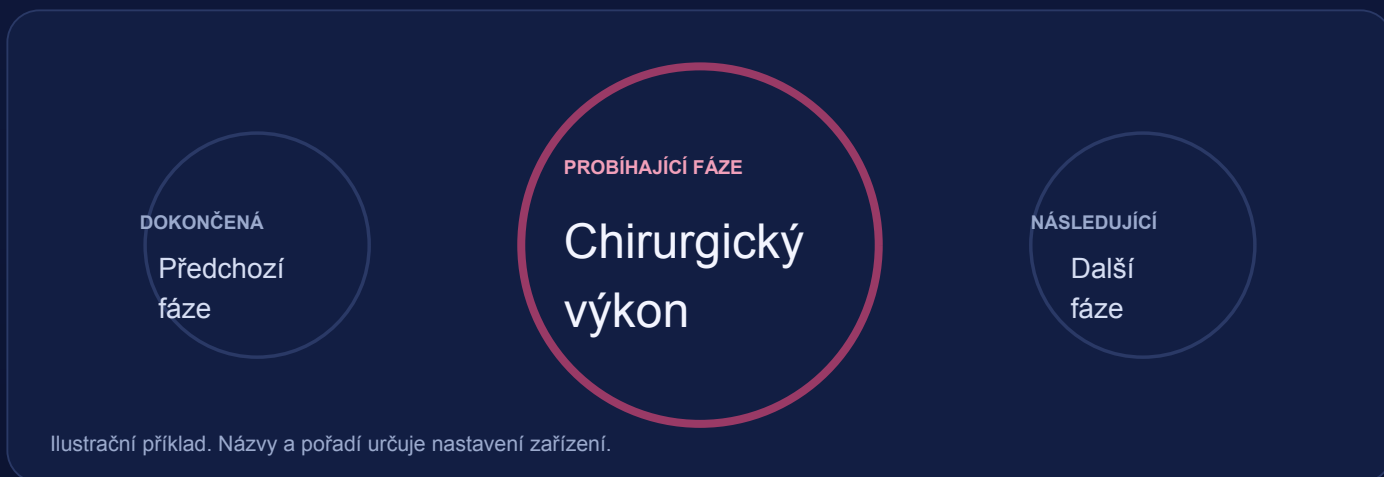

- 1 Vyvolejte přechod**
Na počítači klikněte na hlavní kruh nebo pravý kruh **Následující fáze**. Na telefonu použijte **Další fáze**.
- 2 Zkontrolujte cílovou fázi**
V okně **Potvrzení přechodu** přečtěte název. Tlačítko **Potvrdit** provede změnu; **Zrušit** ponechá původní stav.
- 3 Ověřte výsledek**
Uprostřed se musí zobrazit nový název. Fáze se procházejí dopředu v pořadí nastaveném pro vaše zařízení.

Pozor na nechtěný posun

Levý kruh ani dolní přehled nejsou volbou pro návrat nebo přeskočení fáze. Při chybě neprocházejte další fáze jen proto, abyste se vrátili na začátek; obraťte se na správce.

PERSONÁL NA SÁLE

Přiřadte lékaře a sestru

Běžné ovládání sálu nabízí výběr lékaře a sestry. Obsazení kontrolujte podle jmen.

Lékař**Sestra**

- 1 Otevřete výběr profese**
Stiskněte **Lékař** nebo **Sestra**. Pokud již někdo na sále je, tlačítko zobrazuje jméno.
- 2 Vyhledejte osobu**
Zkontrolujte **Aktuální obsazení** a seznam **Volný personál**. Podle potřeby použijte **Hledat podle jména....**
- 3 Klikněte na dostupnou osobu**
Výběr se použije přímo a okno se zavře. Není zde další tlačítko Uložit. Stejně doplňte druhou profesi.
- 4 Při změně směny přiřazení upravte**
Vyberte náhradu nebo použijte **Odhlásit ze sálu**. Tím uvolníte osobu ze sálu, nikoli svůj přihlášený účet.

Proč nelze osobu vybrat

Zašedlá položka může uvádět **PN**, **Dovolená** nebo přiřazení **Sál:** Nedostupnou osobu nelze tímto výběrem přidělit současně na další sál. Chybějící či nesprávnou evidenci řešte se správcem personálu.

Pokud pomocné počítadlo týmu nesouhlasí se dvěma dostupnými profesemi, nevytvářejte další roli. Zkontrolujte konkrétní jména a nesoulad oznamte správci.

ČAS A PŘÍJEZD

Výzva pacienta a odhad

Rozlišujte evidenci příjezdu, délku fáze a předpokládaný konec.



Volat → Příjezd

Volat zaznamená výzvu a spustí čekací čas. Po skutečném příjezdu stiskněte **Příjezd**. Tato akce sama neposouvá pracovní fázi.



- / + upravuje odhad

Odhad konce zkrátíte nebo prodloužíte po čtvrthodinách. Změna se použije přímo, bez dalšího ukládání. Nejde o přechod do jiné fáze.

Volat není telefonní hovor

Tlačítko zaznamenává událost v aplikaci. Skutečné přivolání pacienta nebo kontakt s oddělením proveďte podle zvyklostí pracoviště.

Uplynulá doba a hodina ukončení

Časovač detailu ukazuje dobu aktuální fáze. **Odhadovaný konec** je očekávaná hodina skončení, nikoli důkaz, že již výkon skončil. Průběžně jej zpřesňujte.

Jak číst časovač detailu

Do jedné hodiny používá formát minut a sekund: například **12:30** znamená 12 minut a 30 sekund. Po hodině přepíná na hodiny a minuty: **01:24** znamená 1 hodinu a 24 minut.

Ve 3D panelu se mohou časy lišit

Dlaždice **Uplynulý čas** vychází ze začátku cyklu, případně fáze, pokud začátek cyklu chybí. Čas pod průběhovou lištou sleduje fázi. Údaj **Další výkon** berte jako orientační, ne jako potvrzený termín rozpisu.

ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

Pauza a hygiena

Zvláštní označení nemění samo o sobě pořadí pracovních fází.



Pauza / Pokračovat

Pauza označí přerušení. Tlačítko se změní na **Pokračovat**, které obnoví ovládání stejné fáze. Během pauzy nelze posunout fázi ani upravovat odhad.



Hygienický režim

Tlačítkem **Hygienický režim**, na telefonu **Hygiena**, zapnete zvýraznění. Zobrazí se **Zvýšený hygienický režim**. Opětovné stisknutí jej vypne.

Pauza není plánovaná přestávka

Pauza v detailu je záznam skutečného přerušení. **Přestávka** v týdenním rozvrhu je plánovaný čas, který se odečítá od provozní kapacity sálu.

Co se stane s časem

Časovač se během pauzy vizuálně zastaví. Po pokračování se přepočítá od původního začátku fáze; nelze proto předpokládat, že zobrazený čas pauzu automaticky odečte.

Hygienické označení je informace

Zapnutí ani vypnutí označení neznamena, že byla skutečně provedena potřebná hygienická opatření. Jejich provedení se řídí pravidly pracoviště.

Nouzová situace

Upozornění a označení v aplikaci nenahrazují přímou komunikaci ani zavedený postup pro naléhavou situaci. Nespoléhejte pouze na to, že si někdo všimne změny na obrazovce.

UKONČENÍ PRÁCE

Dokončete celý cyklus

Fáze Ukončení výkonu nemusí být posledním krokem evidence.

1 Dokončujte fáze v jejich pořadí

Po ukončení výkonu mohou následovat další kroky, například odjezd pacienta a úklid. Jejich seznam určuje vaše zařízení.

2 Na konci vyberte Nový cyklus

Z poslední fáze otevřete **Nový cyklus** a potvrďte návrat do první, připravené fáze. Dosavadní cyklus se uzavře a odhad konce se vymaže.

3 Zkontrolujte připravený stav

Ověřte nový název fáze. Další cyklus se rozběhne až novým potvrzeným posunem. Zavření detailu samo nic neukončuje.

Upozornění při delším úklidu

Při úklidu přesahujícím 30 minut může aplikace oznámit **Úklid sálu přesahuje 30 minut** a krok následně automaticky ukončit. Automatické označení neprokazuje skutečné dokončení úklidu. Připravenost vždy ověřte na pracovišti.

Krátká fáze nebo neobvyklý interval

Při velmi krátkém kroku se může objevit upozornění. Zkontrolujte, zda jste neklikli omylem; v potvrzení lze volit **Zrušit**. Zavření informačního upozornění samo nevrací už provedenou změnu.

Uzamčený sál

U uzamčeného sálu nelze zahájit nový cyklus. Nezaměňujte uzamčení s pauzou nebo s vypnutým dnem rozvrhu. Uvolnění řešte s oprávněnou osobou.

KOMUNIKACE

Notifikace a zprávy

Před odesláním zkontrolujte, ze kterého sálu zpráva pochází.

- 1 Otevřete zvonek v detailu**
V nabídce **Poslat notifikaci** se zobrazí název sálu a dostupné důvody.
- 2 Zvolte správný důvod**
Například **Pozdní příchod operátora**, **Pozdní příchod ARO**, **Nepřipravený pacient** nebo **Pozdní příjezd z oddělení**. Kliknutí na přednastavený důvod rovnou zahájí odesílání.
- 3 Pro vlastní text zvolte Jiný důvod**
Vyplňte důvod a stiskněte **Odeslat**. Během odesílání vyčkejte; neposílejte opakovaně stejnou zprávu.
- 4 Přečtěte přijaté oznámení**
Zpráva od správce se může zobrazit jako **Zpráva pro sál**. Tlačítko **Rozumím** ji zavře a nemění fázi.

Zavřené okno neznamená potvrzené doručení

Příjemce určuje nastavení pracoviště. Samotné zavření nabídky nepotvrzuje, že konkrétní osoba zprávu převzala. Důležité nebo naléhavé sdělení ověřte přímou komunikací.

Hromadná zpráva od administrátora

Máte-li tuto funkci povolenou, otevřete v levé navigaci **Zpráva na sál**, označte jeden či více sálů, napište stručnou zprávu a zvolte **Odeslat**. Před volbou **Vybrat vše** ověřte, zda je sdělení skutečně určeno všem.

PŘEHLED PROVOZU

Tok pacienta

Sledujte rozložení aktuálních fází napříč sály, aniž byste měnili jejich stav.

Živě

Fáze

Historie

Živě: kde se právě nacházíme

Otevřete **Tok pacienta** a zvolte **Živě**. Uzly sálů ukazují aktuální stav. V přehledu rozeznáte také pauzu, uzamčení či nouzové označení.

Fáze: podrobnější pohled

Přepněte na **Fáze**, vyberte sál a podle potřeby den. Šipkami můžete listovat mezi dny a porovnat zaznamenaný průběh.

Historie: již zaznamenaný průběh

Volba **Historie** pomáhá prohlížet dobu jednotlivých stavů a dokončené výkony dostupné v přehledu. Nejprve ověřte, který sál a období sledujete.

Upravte si čitelnost pohledu

Sál vyhledejte podle názvu. Nepotřebné sály můžete v tomto pohledu skrýt a znovu zobrazit. V režimu **Živě** tlačítka + a - upravíte velikost grafu.



Skrytí není vypnutí

Skrytý sál pouze zmizí z vašeho pohledu. Tím neměníte jeho provozní dobu, fázi ani dostupnost ostatním uživatelům.



Sledování není ovládání

Potřebujete-li změnit fázi nebo personál, otevřete skutečný detail sálu. Monitor slouží především k orientaci.

ČASOVÝ PŘEHLED

Timeline

Zobrazte průběh provozu v řádcích jednotlivých sálů.

Živě / Souhrn

Historie

Časová lupa

TV režim

- 1 Začněte živým pohledem**
Otevřete **Timeline**. Každý řádek patří jednomu sálu; barevné úseky znázorňují fáze. Význam barev a značek zobrazí **Legenda časové osy**.
- 2 Najděte důležitý sál**
Použijte dostupné filtry, **Řadit sály** nebo **Triáž pozornosti**. Přepínačem **Hustota řádků** zvolte přehlednější nebo podrobnější rozložení.
- 3 Prohlédněte den nebo historii**
Volba **Souhrn** ukáže denní výsledky. Přes **Historie** vyberte den, který chcete zkoumat. Vždy zkontrolujte zobrazené datum.
- 4 Zkoumejte konkrétní okamžik**
Zapněte **Časová lupa** a táhněte po ose. Ukončíte ji klávesou **Esc** nebo dvojklikem. Pro velký monitor použijte **TV režim**.

Historický pohled není historické ovládání

Kliknutí na název sálu může otevřít jeho **aktuální** detail. Před změnou stavu si znovu ověřte, že pracujete s živým provozem, nikoli se záznamem minulého dne.

PLÁNOVÁNÍ

Rozpis sálů a kalendář

Rozpis vyjadřuje plán využití sálů. Není totožný se skutečně probíhající fází.

- 1 Otevřete rozpis a období**

V **Nastavení** → **Rozpis sálů** vyberte **Týden**, **Měsíc** nebo **Rok**. Zkontrolujte sál a klikněte na požadovaný blok.
- 2 Zvolte obsah a část dne**

Vyberte **Operační obor**, případně **Sál uzavřen** či **Servis**. V části **Část dne** ověřte **Dopoledne**, **Odpoledne** nebo **Celý den**. Editor předvoluje celý den.
- 3 Zkontrolujte platnost přiřazení**

Tento den změní jeden den. **Do konce měsíce** a **Do konce roku** opakují přiřazení každý týden ve stejný den. Neznamenaají všechny dny období.
- 4 Uložte a prohlédněte výsledek**

Použijte **Uložit rozpis**. **Odebrat přiřazení** odstraní plán ve zvoleném rozsahu; **Zrušit** zavře editor bez uložení.

Kalendář je přehled, nikoli editor

V **Nastavení** → **Kalendář** zvolte měsíc, případně konkrétní sál. Kliknutím na den otevřete podrobnosti; **DOP** a **ODP** znamenají dopoledne a odpoledne. **Obnovit kalendář** načte aktuální plán. Změny dělejte v Rozpisu sálů.

Tři odlišné informace

Provozní doba říká, kdy má být sál otevřen. **Rozpis sálů** určuje plánované využití oborem. **Fáze sálu** zaznamenává, co se na něm právě skutečně děje.

PERSONÁLNÍ PŘEHLED

Kdo je k dispozici

Evidence osob a jejich dostupnost jsou dvě různé části práce s personálem.

Přidejte nebo upravte pracovníka

V **Nastavení** → **Personál** vyberte **Anesteziologové** nebo **Sestry**. Nejprve osobu vyhledejte. Chybí-li, zvolte **Přidat pracovníka**, vyplňte jméno a potvrďte **Přidat**. Přes **Upravit pracovníka** doplňte potřebné údaje a **Uložit změny**.

Udržujte aktuální dostupnost

Průběžně upravujte nepřítomnosti, například PN a dovolenou. Pro dočasné vyřazení použijte **Deaktivovat pracovníka**, nikoli smazání. Označení **Doporučený** zvýhodňuje osobu při výběru.

Otevřete Přehled personálu

V **Nastavení** → **Přehled** přepínejte **Nástěnka směny** a **Seznam**. Filtry **Všechny**, **V provozu** a **Chybí** pomohou najít neobsazené pozice. V **Nástěnce směny** klikněte na neobsazenou pozici v **Chybí obsadit** nebo na osobu v **Na sálech**.

Volný neznamená fyzicky přítomný

Označení volného personálu vychází z evidence aplikace. Samo nepotvrzuje, že je pracovník právě na pracovišti nebo může nastoupit. Skutečnou dostupnost ověřte běžnou komunikací.

Management: přidejte příjemce upozornění

V **Nastavení** → **Management** zvolte **Přidat kontakt**. Vyplňte pozici a e-mail, zvolte **Odběr notifikací**, ověřte **Aktivní kontakt** a potvrďte **Uložit kontakt**. Tím nezakládáte uživatelský účet. Odběr sám nepotvrzuje doručení zpráv.

VÝSLEDKY PROVOZU

Statistiky

Nejdříve vyberte záložku a období. Až potom porovnávejte čísla.

ZÁLOŽKA	K ČEMU SLOUŽÍ
Přehled	Souhrn provozu, výkony, vytížení a rozpad podle sálů.
Finance	Orientační provozní náklady podle zaznamenaného času a nastavených sazeb.
Sazby	Přehled hodinových sazeb; úpravy jen podle oprávnění.
Sály	Porovnání jednotlivých sálů, jejich výkonů a využití.
Fáze	Naměřené trvání a zastoupení jednotlivých pracovních fází.
Notifikace	Zaznamenaná upozornění, příjemci a dostupné dopady.
Zařízení	Přehled evidovaných zařízení aplikace, nikoli nemocnic.

Vyberte období i případný konkrétní den

Globální volby **Den**, **Týden**, **Měsíc**, **Rok** znamenají posledních 24 hodin, 7, 30 a 365 dní. Denní kalendář v Přehledu, Sálech a Fázích pracuje od 07:00 do 07:00 dalšího dne; Finance a Notifikace s kalendářním dnem. Vždy čtěte rozsah nad výsledky.

Chybějící hodnota není nula

Znak - znamená, že údaj nelze spolehlivě určit. Bez známé provozní kapacity například nelze vyčíslit vytížení. Náklady vycházejí z aktuálně nastavených sazeb, nikoli z doložené historie změn sazeb.

Které sály se započítávají

Provozní přehledy zahrnují sály s plánovaným nebo doloženým provozem ve zvoleném období. Dnes vypnutý sál zůstane v historii, pokud v období skutečně pracoval. Sazby a registr zařízení zůstávají úplnou evidencí.

VÝSTUPY

Vytiskněte vybranou záložku

Pro tisk nebo PDF používejte report aktuální záložky statistik.

1 Vyberte obsah

Otevřete **Statistiky**, požadovanou záložku a správné období. Má-li záložka vlastní kalendář, zkontrolujte také vybraný den.

2 Vyčkejte na načtení dat

Pokud aplikace hlásí načítání nebo chybu, nejprve ji vyřešte. Neúplná data nelze vydávat za nulový provoz.

3 Otevřete tiskový report

Stiskněte **Tisk** nebo **PDF**. Ve statistikách můžete použít také **Ctrl+P**, na Macu **Cmd+P**.

4 Zkontrolujte náhled

Report obsahuje název záložky, období a přehledné tabulky. Zkontrolujte, že odpovídá právě požadovaným datům.

5 Zvolte tiskárnu nebo PDF

V tiskovém dialogu vyberte tiskárnu, případně **Uložit jako PDF** či obdobnou systémovou volbu. Nastavte stránky a potvrďte tisk nebo uložení.

Když se náhled neotevře

Povolte otevření nového okna pro tuto aplikaci a akci zopakujte. Pokud se data načítají, vyčkejte. Leží-li vybraný den mimo dostupnou historii, zvolte novější den v kalendáři dané záložky.

Report ukazuje údaje vybrané záložky. Pro výstup z jiné záložky se do ní přepněte a vytvořte samostatný report. Při sdílení zvažte, komu jsou informace určeny.

3D DISPOZICE

Prohlédněte operační blok

Prostorové zobrazení slouží k orientaci a rychlému výběru sálu.

Karty sálů

3D pohled

Půdorys

Vycentrovat

1**Přepněte do 3D dispozice**

V **Přehledu** zvolte **3D dispozice**. V poli podlaží vyberte požadovanou část bloku.

2**Zvolte pohled**

Použijte **3D pohled** nebo **Půdorys**. Akce **Vycentrovat scénu** vrátí přehledný celkový záběr.

3**Vyberte sál**

Klikněte na sál nebo jeho štítek. Informační panel ukáže aktuální stav a související údaje.

4**Otevřete provozní ovládání**

Stiskněte **Otevřít detail sálu**. Křížkem pouze zrušíte výběr. Tlačítko **Karty sálů** vás vrátí do kartového přehledu.

**Barvy a světlo**

Propojené sály přebírají aktuální stav.
Připravený sál nemá stavově obarvené stěny.
Aktivní nebo pozastavený sál používá
provozní osvětlení.

**Bez propojení**

Místnost označená **Bez propojení** není
navázána na skutečný sál. Neotevře jeho živý
detail, dokud správce vazbu nedoplní.

Model je koncepční. Nepoužívejte jej jako náhradu stavební dokumentace nebo jako ověření skutečných rozměrů.

3D EDITOR

Místnosti a vybavení

Úpravy provádí administrátor s povoleným přístupem nebo superadministrátor.

- 1 Otevřete editor**
Zvolte **Nastavení** → **3D dispozice**. Pokud blok ještě není vytvořen, použijte **Vytvořit operační blok**.
- 2 Vyberte patro a prostor**
V části **Budova a patra** zvolte patro. Přidejte například **Operační sál**, **Přípravnu**, **Sklad**, **Dospávací pokoj** nebo **Chodbu**.
- 3 Upravte místnost**
V režimu **Místnosti** vyberte prostor v modelu nebo v seznamu **Výběr na patře**. Použijte **Přesun**, **Otočení** nebo **Rozměry**; vlastnosti doladíte v pravém panelu.
- 4 Zkontrolujte vazbu a vybavení**
V poli **Propojit s operačním sálem** vyberte odpovídající skutečný sál. V režimu **Vybavení** upravte objekty nebo je přidejte z katalogu.
- 5 Uložte výsledek**
Nahoře stiskněte **Uložit dispozici**. Počkejte na stav **Dispozice je uložena**. Rozpracované úpravy se samy nepublikují jako uložený blok.

Kopie místnosti potřebuje vlastní kontrolu

Duplikovat zkopíruje prostor i vybavení, ne však automaticky jeho propojení se skutečným sálem. U každé kopie zkontrolujte název, umístění i vazbu.

Načíst uloženou dispozici vrátí poslední uložený stav. Nejde o uložení práce. **Nová dispozice** připraví nový výchozí návrh; také jej musíte vědomě uložit.

3D EDITOR

Zarovnání a stěny

Udržujte blok přehledný a společné části upravujte cíleně.

Přesun více místností najednou

V režimu **Místnosti** vyberte první prostor. Se stisknutým **Shift**, **Ctrl** nebo **Cmd** přidávejte další. Skupinu přesuňte společně; rozestupy a vybavení se zachovají. **Vybrat vše** vybere místnosti aktuálního patra.

Přichycení a přesné zarovnání

Vyberte krok v nabídce **Přichycení**. Při přesunu sledujte vodící čáry hran a středů. Akce **Přichytit** zarovná prostor k blízké hraně nebo ose. **Volně** vypíná krok mřížky, ne všechno zarovnávání.

Obvod budovy

V levém panelu zapněte + **Přidat obvodové stěny**. Plášť sleduje vnější hrany místností a přizpůsobuje se jejich změnám. Výšku a tloušťku nastavte podle požadovaného modelu.

Ohraničení s odstupem

V části **Ohraničení KNL** zvolte + **Přidat ohraničení**. Odsazení nastavte **Podle šířky chodby** nebo jako **Vlastní hodnota**. Pro plné stěny vyberte profil **Pevné nemocniční stěny**.

Co je společné a co jednotlivé

Skupinový výběr slouží ke společnému přesunu. Otočení a rozměry měňte po jedné místnosti. Přepínač **Nízké stěny** / **Celé stěny** upravuje pracovní pohled; po změnách vždy uložte dispozici.

Vrátit úpravu: Ctrl/Cmd+Z. **Obnovit úpravu:** Ctrl/Cmd+Shift+Z. **Zrušit výběr:** Esc. Zkratky používejte při práci v editoru, ne během psaní do pole.

Odstranění celého bloku

Horní akce **Odstranit operační blok** vyžaduje potvrzení **Odstranit blok**. Smaže 3D dispozici včetně místností a vybavení, nikoli provozní data skutečných sálů. Volba **Ponechat** mazání zruší.

OR CONTROL

Nastavte provozní dobu

Provozní doba patří k jednotlivým dnům v týdnu.

- 1 Otevřete rozvrh sálu**
V **Nastavení** → **Operační sály** najděte požadovaný sál a otevřete jeho **Rozvrh**.
- 2 Zapněte potřebné dny**
U každého dne použijte přepínač provozu vpravo. Aktivní den má označení **V provozu**; vypnutý **Mimo provoz**.
- 3 Vyplňte Od, Do a Přestávku**
Nastavte začátek, konec a plánovanou přestávku. Zkontrolujte **Čistý čas**. Konec aktivního dne musí následovat po začátku.
- 4 Potvrďte Uložit změny**
Po dobu ukládání vyčkejte. Okno se zavře až po potvrzeném uložení a zobrazí se zpráva **Provozní doba sálu byla uložena**.
- 5 Zkontrolujte výsledek**
Znovu otevřete rozvrh a ověřte nastavené dny. Při chybě zůstává formulář otevřený i s vyplněnými hodnotami; opravte označený údaj a uložte znovu.

Mimo provoz neznamená Sál připraven

V OR CONTROL jde o vypnutý den rozvrhu. Změna rozvrhu sama nespouští ani neukončuje pracovní cyklus. Dříve zaznamenané výkony zůstávají v historických statistikách.

NASTAVENÍ

Práva a odpovědnosti

Viditelnost modulu neznamená automaticky právo měnit všechny jeho části.

ROLE	ROZSAH PRÁCE
Běžný uživatel	Používá moduly povolené své roli. ARO, COS, Management i Primariát mohou mít odlišný přístup.
Administrátor	Spravuje povolené části přiděleného zařízení. Nezakládá nemocnice a nepřepíná mezi nimi.
Superadministrátor	Spravuje zdravotnická zařízení a přístup rolí k modulům i podmodulům.

Jak otevřít nastavení

V rozcestníku přepínejte **Karusel** a **Mřížka**. V karuselu vyberte modul šipkami a klikněte na přední kartu. V mřížce pomůže **Hledat modul** a filtry.

Jak superadministrátor udělí přístup

V **Nastavení** → **Nastavení** zkontrolujte aktivní nemocnici. Otevřete **Správa modulů**, zapněte modul, povolte roli v **Přístup rolí** a rozbalte **Podmoduly**. Přepínače se ukládají ihned.

Proč samotné Nastavení nestačí

Pro otevření konkrétní části musí být povolen nadřazený modul i příslušný podmodul. **3D dispozice** patří k podmodulům přehledu. Administrátor si tato oprávnění sám nepřiděluje.

Nezaměňujte dvě evidence

Zdravotnické zařízení znamená nemocnici či organizaci a spravuje je superadministrátor. **Správa zařízení** znamená evidenci počítačů, tabletů a telefonů používaných s aplikací.

RYCHLÁ POMOC

Když něco nefunguje

Začněte kontrolou výběru, oprávnění a posledního zobrazeného hlášení.

SITUACE	CO UDĚLAT
Chybí modul nebo nastavení	Ověřte přihlášenou roli. Správce zkontroluje povolení modulu i jeho podmodulů.
Rozvrh nejde uložit	Přečtěte chybu. Ověřte zapnutí dne a čas Od/Do. Zadání při chybě zůstává otevřené; poté zkuste uložení znovu.
Nelze změnit fázi	Zkontrolujte pauzu, uzamčení a čekající potvrzovací okno. Během pauzy nejprve použijte Pokračovat.
Personál nelze vybrat	Zkontrolujte nepřítomnost a přiřazení na jiný sál. Nesoulad řešte s osobou spravující personál.
3D sál nemá živý stav	Zkontrolujte označení Bez propojení. Správce musí místnost propojit se skutečným sálem a dispozici uložit.
Ve statistikách je -	Nejde automaticky o nulu. Pro danou metriku může chybět kapacita, sazba nebo dostatek doložených údajů.
Tiskový report se neotevře	Povolte nové okno pro aplikaci. Ověřte dokončené načtení a případné chybové hlášení.
Uložení 3D hlásí cizí změnu	Jiný uživatel mezitím upravil dispozici. Neopakujte slepě uložení; domluvte se a načtete aktuálně uložený stav.

Co poslat správci

Uveďte název modulu a sálu, čas potíží, provedený krok a přesné znění chyby. Pokud přiložíte snímek, skryjte nepotřebné osobní údaje. Nikdy neposílejte heslo.

PRAKTICKÁ POMŮCKA

Kontrolní seznam směny

Krátké ověření před prací, v průběhu provozu a při předání.

PŘED ZAHÁJENÍM

- ✓ Jsem přihlášen ve správném zařízení a správnou rolí.
- ✓ Otevřený detail patří správnému sálu.
- ✓ Aktuální fáze a přiřazený personál odpovídají skutečnosti.

BĚHEM PROVOZU

- ✓ Fáze potvrzuji až podle skutečného průběhu.
- ✓ Odhad konce průběžně zpřesňuji; není to skutečný čas ukončení.
- ✓ Pauzu, příjezd a hygienický režim eviduji jejich vlastní akcí.
- ✓ Důležité sdělení ověřuji i přímou komunikací.

PŘI PŘEDÁNÍ NEBO UKONČENÍ

- ✓ Zkontroluji otevřenou fázi, pauzu, odhad a personál.
- ✓ Dokončení celého cyklu potvrdím, pokud skutečně nastalo.
- ✓ Rozpracovaný rozvrh nebo 3D dispozici vědomě uložím.
- ✓ Na sdíleném zařízení se odhlásím.

Příručka popisuje ovládání, nikoli klinické postupy

Názvy a barvy fází i dostupné moduly se mohou lišit podle nastavení pracoviště. Obrázek na obálce je dodaná vizuální reference; schémata uvnitř jsou ilustrační a neobsahují údaje pacientů ani personálu.

Vydání září 2026. Připraveno podle aktuálně dostupného ovládání aplikace. Při změně funkcí nebo místních pravidel příručku aktualizujte.